

MENJAVA INFUZIJSKEGA SETA IN REZERVOARJA

POSTOPEK MENJAVE

Infuzijski set in rezervoar menjate na 2-3 dni.

1. SKLOP - Priprava

PRIPRAVITE:

- na čisto podlago
- s čistimi rokami
 - infuzijski set
 - rezervoar
 - inzulin (vsaj eno uro prej naj bo na sobni temperaturi)
 - sprožilno napravo
 - alkoholne robčke
 - svinčnik

2. SKLOP - Priprava rezervoarja in seta


POSTOPEK:

1. Vzemite rezervoar iz pakiranja.
2. Nato potegnite bat rezervoarja do oznake 3 mL – potisnite bat nazaj, da v rezervoarju ni zraka, ter »razrahljajte« bat rezervoarja.
3. Z alkoholnim robčkom očistite ampulo inzulina, počakajte, da se posuši in jo nataknite na moder vmesnik rezervoarja.
4. V rezervoar povlecite toliko inzulina, kot ga potrebujete za 3 dni + vsaj 20 enot inzulina za rezervo, nato odstranite ampulo z inzulinom.
5. Iz rezervoarja odstranite morebitne zračne mehurčke. Moder vmesnik obrnite navzdol in ga nato odstranite.
6. Pred odpiranjem pakiranja infuzijskega seta pritisnite na modro zaščito za iglo in nato odprite pakiranje.
7. Preverite, ali je igla zaščiten.
8. Odstranite lepilni trak, ki drži cevko.
9. Preverite, da ni zanke na cevki (raztegnite infuzijsko cevko).
10. Infuzijski set sklopite z rezervoarjem in »zaklenite« na »klik«.
11. V infuzijsko cevko stisnite malo inzulina (vsaj 5 cm brez zračnih mehurčkov).
12. Odstranite bat rezervoarja (samo odvijte, ne vlecite).
13. Odklopite infuzijski set od telesa, odstranite rezervoar iz črpalke – ne smete biti povezani z inzulinsko črpalko.


POSTOPEK VSTAVITVE REZERVOARJA V ČRPALKO



1. V osnovnem meniju izberite ikono **REZERVOAR IN SET**
2. Nato izberite **Nov rezervoar**.

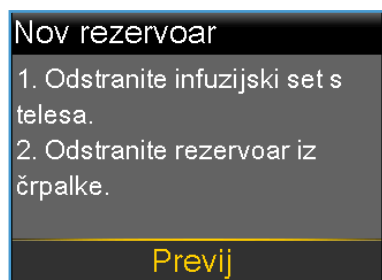



3. Če še niste odklopili infuzijskega seta od telesa in odstranili starega rezervoarja iz črpalke, to storite zdaj, nato izberite **NAPREJ**.
4. Izberite **PREVIJ** in počakajte.

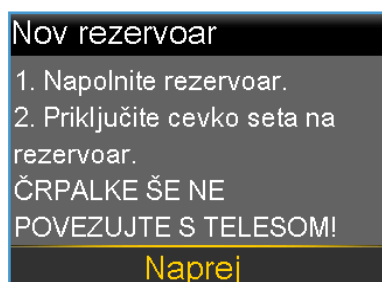


5. Ko je previjanje končano, vzemite pripravljen rezervoar in infuzijski set. Rezervoar vstavite v črpalko in zaprite pokrov. **ČRPALKE ŠE NE POVEZUJTE S TELESOM**. Izberite **NAPREJ**.



6. V meniju **POLNJENJE REZERVOARJA** izberite **NAPOLNI** in držite do konca polnjenja.
7. Ko se na zaslonu prikaže **KONČANO**, izberite **NAPREJ**. **ČRPALKE ŠE NE POVEZUJTE S TELESOM**.

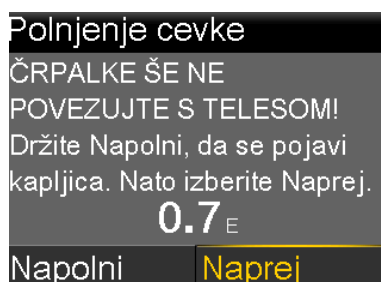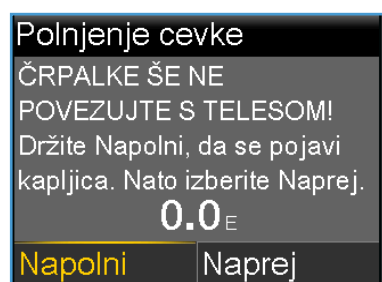


8. V meniju **POLNJENJE CEVKE** izberite **NAPOLNI**, in ponovno držite dokler se ne pojavi kapljica na koncu seta, nato spustite. Preverite mehurčke v cevki, nato pritisnite in izberite **NAPREJ**.

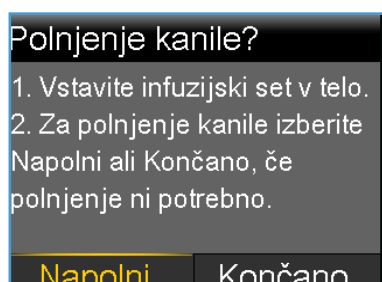

9. Zdaj ste v meniju **POLNJENJE KANILE** in črpalka čaka, da vstavite infuzijski set v telo. Pojdite na **3. SKLOP**.

3. SKLOP - Postopek vstavitve infuzijskega seta

1. Očistite kožo in pustite odkrito, da se posuši.
2. Vstavite infuzijski set v sprožilno napravo.
3. Rahlo pritisnite na modro zaščito za iglo, da se infuzijski set zaskoči.
4. Odstranite zaščitno folijo z obliža.
5. Napnite sprožilno napravo.
6. Odstranite modro zaščito za iglo – zavrtite in nato potegnite.
7. Sprožilno napravo postavite na očiščeno kožo.
8. Sočasno stisnite majhna sprožilna gumba na obeh straneh sprožilne naprave.
9. Pritisnite zgornji gumb na sprožilni napravi, da popusti držalo za iglo in odstranite sprožilno napravo.
10. S palcem in kazalcem zadržite prozorno plastiko infuzijskega seta ob telesu in odstranite iglo iz podkožja ter jo zaščitite - odvrzite jo v posodo, namenjeno ostrim in kužnim odpadkom.
11. Ko ste vstavili infuzijski set, v črpalki v funkciji **POLNJENJE KANILE** izberite **NAPOLNI** za polnjenje kanile ali tipko **NAZAJ** za preklic.

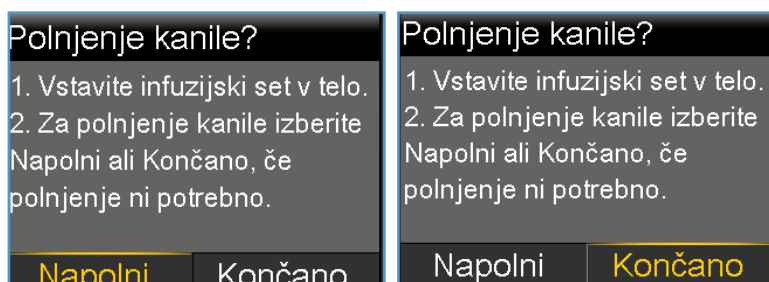


Ko izberete **NAPOLNI**, izberite **KOLIČINA POLNJENJA** in vnesite:




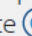
- 0,500 E, če uporabljate 9 mm kanilo,
- 0,300 E, če uporabljate 6 mm kanilo.

Vedno preverite količino polnjenja in nato izberite **OK** in nato **NAPOLNI**.

Menjava infuzijskega seta je zdaj zaključena.



Opomba: Črpalka si bo zapomnila nazadnje uporabljeno **količino polnjenja**. Vedno potrdite, da je količina polnjenja pravilna.

- Če je pravilna, pritisnite , da izberete **Napolni**, nato pa pritisnite .
- Če ni pravilna, pritisnite . Spremenite na pravo količino in pritisnite .

Nato izberite **Napolni**.

POMEBNO: OBVEZNO po dveh urah izmerite glukozo v krvi, da se prepričate, ali je infuzijski set pravilno vstavljen. V primeru visoke vrednosti glukoze dovedete korekcijski bolus. Čez eno uro ponovite meritev glukoze - če vrednost glukoze pada, je set pravilno vstavljen. Če je vrednost glukoze še vedno visoka ali celo višja, izvedete korekcijo s **PERESNIKOM**, postopek menjave seta pa v celoti ponovite.